


THERMOCHIP FÜR KLEINTIERE UND PFERDE

Winziger passiver **RADIOFREQUENZCHIP (RFID)**,
der erst durch das Lesegerät aktiviert wird.

CLASSIC SIZE:
2,12 mm x 13 mm



STERILER **EINMAL-APPLIKATOR**
Ergonomisch und sicher,
„No return click system“ vermeidet
vorzeitigen Verlust des Mikrochips

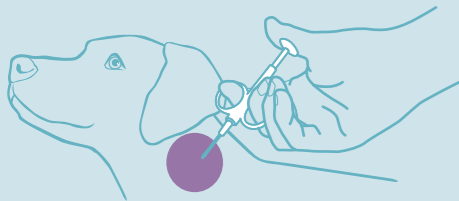

IMPLANTIERUNG:

Für Hunde, Katzen und Frettchen: die linke Halsseite.

Für Pferde: auf halber Höhe des Halses auf der linken
Seite und 3-4 cm von der Rückenmittellinie entfernt.

! Um Interferenzen zu vermeiden, darf
nur ein Chip implantiert werden.



THERMOCHIP MINI FÜR KLEINTIERE

MINI SIZE:
1,5 mm x 10,7 mm



Jetzt bestellen

per Email:
bestellungspc@msd.de

oder per Fax:
0800 / 018 57 14

155170-AT-Aug2024(400) - AT-SPC-220800003



Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.


Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheits.at



MEHR. WERT.
INNOVATION.



THERMOCHIP MEHR ALS EINE NUMMER

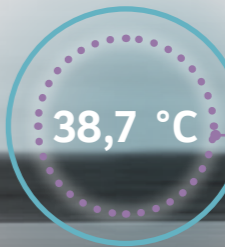

040098528120111



DER MEHR-WERT-CHIP


KAPSEL

Glaszylinder, gewährleistet optimalen Schutz und Biokompatibilität

ANTENNE

CHIP

mit einmaliger 15-stelliger Identifikationsnummer und Temperatursensor

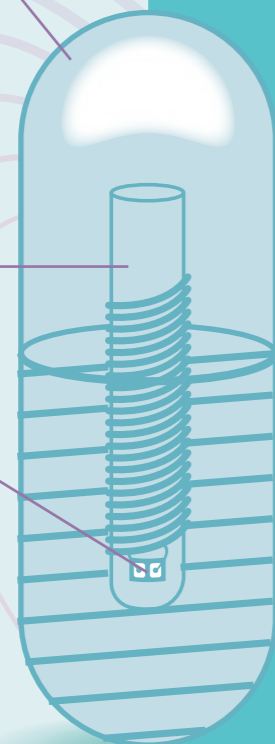

THERMOCHIP


Gemäß ISO Standards und zertifiziert durch das International Committee of Animal Recording

Identifikation per Chip ist Standard.

Der ThermoChip kann mehr

- Identifikation und **gleichzeitige Messung* der Körpertemperatur an der Implantations-Stelle** im Bereich von 33 – 43 °C
- **Temperatur anzeigen mit einem Tastendruck – bei jeder Vorstellung des gechipten Tieres oder auch als Monitoring**
- **Einfache Verfolgung der physiologischen Temperaturintervalle und individuellen Temperatur-Profile**

* Die Messung der Rektaltemperatur ist bei Tieren Goldstandard.

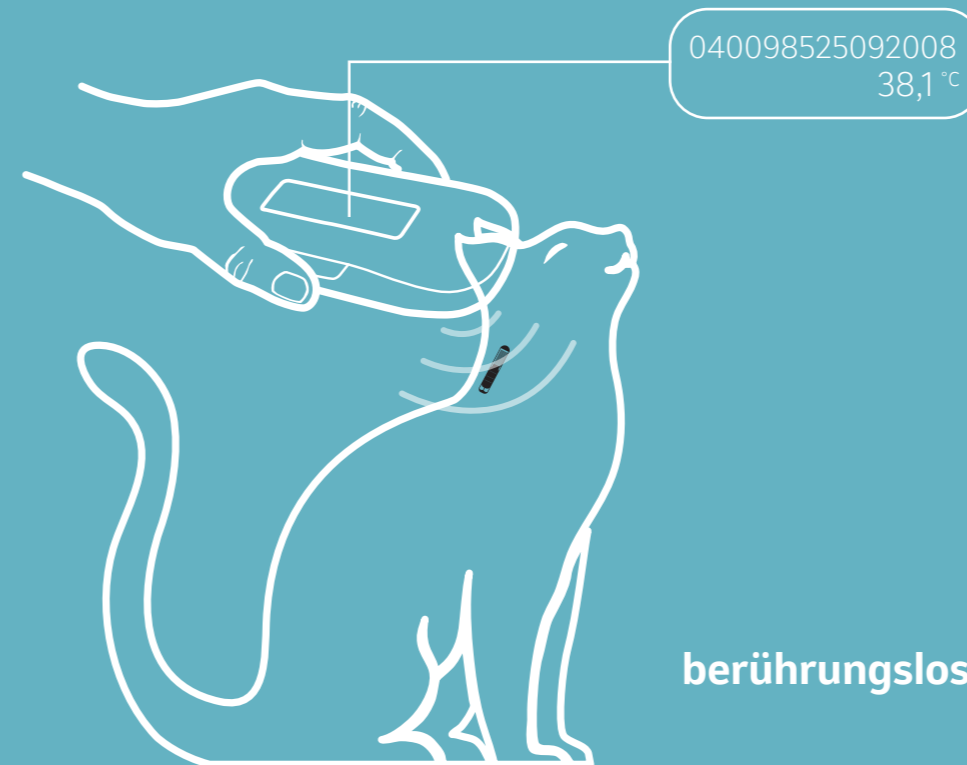

FÜR EIN INDIVIDUELLES TEMPERATURPROFIL



berührungslos

stressfrei



in wenigen Sekunden



bei jeder Untersuchung

UNIVERSAL MICROCHIP READER

- **Leicht und handlich im Hosentaschenformat**
- **Vibration quittiert den erfolgreichen Messvorgang – lautlos**
- **Lesefähigkeit aller gängigen Mikrochips**
- **Automatisches Abschalten nach 30 Sekunden**



GLOBAL POCKET READER PLUS

- **Speichert bis zu 3.000 ID-Datensätze**
- **Kompatibel zu allen Mikrochip-Technologien**
- **Sehr robust**
- **Download- und Export-Funktion**